

INHALTSVERZEICHNIS

MONTIERBARE PRODUKTE

Duschsitze	6
Wandhaltegriffe Ergogrip	10
ProGrip	13
Back-Up	13
Stützgriffe & Stützklappgriffe	14
Badezimmerzubehör	18
Diverses	21
Waschbecken Zubehör	22
Duschrahmen	23



MOBILE PRODUKTE

Duschliegen	23
Dusch- und Toilettenstühle	26
Duschstühle	28
Schwimmbad Produkte	30
Toilettensitz	31



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Informationen	33
Hilfsmittelverzeichnis	33
Befestigungsarten	34



Erleben Sie den Komfort von Sicherheit im Badezimmer!

Dieses Produktübersicht enthält der Bereich der LinidoSolutions von Handicare.
Bitte entnehmen Sie unserer separaten Preisliste für Preisinformation.

Die Bedürfnisse unserer Anwender stehen bei all unseren Produktentwicklungen stets im Vordergrund. Deshalb beachten wir folgende Grundsätze:



Sicherheit Diese steht bei der Entwicklung der Produkte an erster Stelle. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Verarbeitung und die Wahl der richtigen Materialien, damit die Produkte auch bei hohen Belastungen sicher und stabil sind.



Nutzen Unsere Produkte sind sorgfältig auf ihre Funktionalität getestet, bevor Sie auf den Markt kommen. Das Design unserer Produkte ist exakt auf die Bedürfnisse der Anwender ausgerichtet, damit diese z.B. komfortabel im Sitzen duschen oder leicht von der Toilette aufstehen können.



Haltbarkeit Produkte, die in Bad oder Nassräumen verwendet werden, sind extremen Belastungen ausgesetzt, wie z.B. langanhaltender Feuchtigkeit oder dem dauernden Wechsel zwischen kalt und warm. Unsere Spezialbeschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer des Produktes bei gleich bleibendem Komfort für den Anwender.



Ergonomie In der Gestaltung der Produkte spielen ergonomische Aspekte wie z.B. die richtige Sitzhöhe und Sitzbreite, der richtige Sitzwinkel oder die Höhe der Armlehnen eine wichtige Rolle. Deshalb entwickeln wir Produkte, die die natürlichen Bewegungsabläufe des Menschen unterstützen.



Design Wir legen viel Wert auf ein ansprechendes und modernes Design unserer Produkte. Wo es möglich ist, werden deshalb, nicht nur aus hygienischer Sicht, runde Formen verwendet. Eine Auswahl an verschiedenen Materialien und Farben sorgt dafür, dass sich unsere Produkte in Stil und Geschmack gut in das jeweilige Bad des Anwenders integrieren lassen.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, bitte kontaktieren Sie uns! Sie können unsere Daten auf der Rückseite dieser Broschüre finden.

LinidoSolutions Produkte stehen für selbständige und sichere Nutzung von Bad, Dusche und Toilette. Besonderer Wert wurde auf die Bedienungsfreundlichkeit für das Pflegepersonal gelegt. Die Produkte bieten viele Anwendungsmöglichkeiten und eignen sich für den Einsatz zu Hause, in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen.

Unsere Produkte sind über den offiziellen Fachhandel erhältlich, wo Sie auch professionelle Beratung und Service erhalten.

Um bei LinidoSolutions-Produkten immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, empfehlen wir Ihnen unsere Website www.handicare.com regelmäßig zu besuchen.

Unsere Produkte

Materialausführung:

Produkte der LinidoSolutions-Reihe sind in folgenden Ausführungen zu erhalten:

- Beschichteter Stahl
- Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Beschichteter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)
- Polierter Edelstahl 304 (empfohlen bei häufiger Benutzung in Institutionen)

Farben

Die meisten Produkte aus der LinidoSolutions-Reihe sind in folgenden Farben erhältlich:



Allgemeine Informationen

Bei Duschsitzen und -stühlen in poliertem Edelstahl werden die Armlehnen standardmäßig mit einer weißen Beschichtung versehen.

Bei Wandhalte- und Stützklappgriffen in poliertem Edelstahl kann man zwischen (standardmäßigen) weißen oder schwarzen Abdeckkappen/Wandplatten wählen.

Sonderbau von Produkten

Informationen über Sondermaße und Sonderbreiten erhalten Sie auf Nachfrage.








Duschsitz

LI2201.200

- Hochklappbarer Sitz aus Kunststoff
- Sitzbreite 450 mm
- Sitztiefe 405 mm
- Inklusive Bohrschablone
- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2806.000)

△ Bodenstütze LI2214.201 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

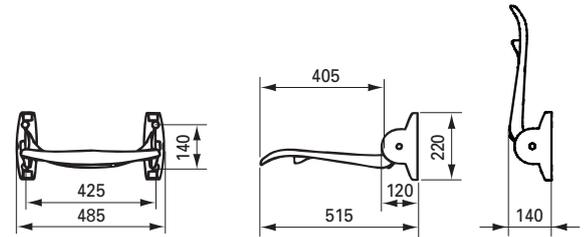


Duschsitz mit Rückenlehne

LI2202.200

- Hochklappbarer Sitz aus Kunststoff
- Kunststoff - Rückenlehne mit Edelstahlrohr
- Sitzbreite 450 mm
- Sitztiefe 405 mm
- Inklusive Bohrschablone
- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2805.000)

△ Bodenstütze LI2214.201 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

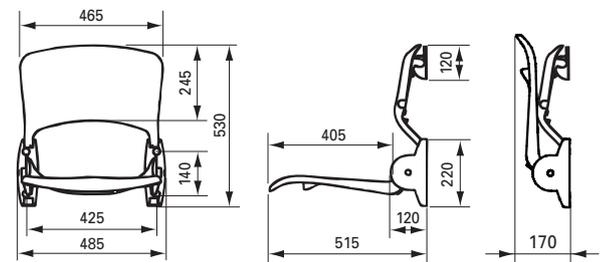


Duschsitz mit Rückenlehne und Armlehnen

LI2203.200

- Hochklappbarer Sitz aus Kunststoff
- Kunststoff - Rückenlehne mit Edelstahlrohr
- Einzel hochklappbare Armlehnen, ergonomisch geformt
- Sitzbreite 450 mm, Sitztiefe 405 mm
- Inklusive Bohrschablone
- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2805.000)

△ Bei einem Körpergewicht >125 kg empfehlen wir einen Duschsitz ohne Armlehnen (LI2202.200) mit zwei seitlich montierten Stützklappgriffen (LI2603.3xx) zu verwenden.

△ Bodenstütze LI2214.201 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

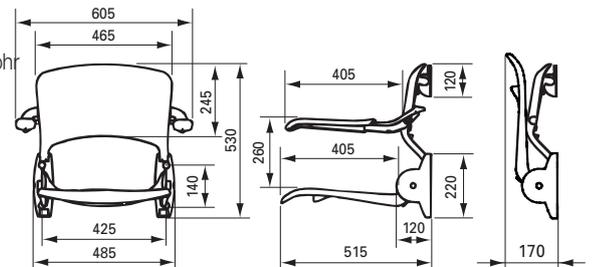


Bodenstütze für Kunststoff-Duschsitze

LI2214.201

- Passend für Linido Duschsitze LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200
- Hochklappbar
- Bestehend aus einer Doppel-Bodenstütze und zwei Distanzschellen
- Stufenlos höhenverstellbar, zum Anpassen an verschiedene Sitzhöhen (Boden bis Oberkante Sitzrahmen: 420-570 mm)
- Nachrüstbar

△ Bodenstütze LI2214.201 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

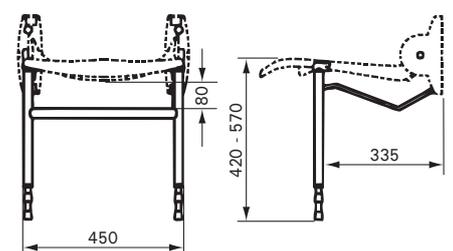

Duschsitze mit verkürzter Sitztiefe

Nur in diesen Abmessungen erhältlich.
Bodenstütze lieferbar: LI2214.002.


LI2203.001

- Hochklappbarer Sitz mit HT-Bespannung
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Sitzbreite 450 mm
- Sitztiefe 315 mm (Aufbautiefe 445 mm)
- Einzeln hochklappbare Armlehnen, ergonomisch geformt

LI2201.001 (nicht abgebildet)

- Wie LI2203.001, ohne Armlehnen und Rückenlehne (Aufbautiefe 375 mm)

△ Bodenstütze LI2214.002 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

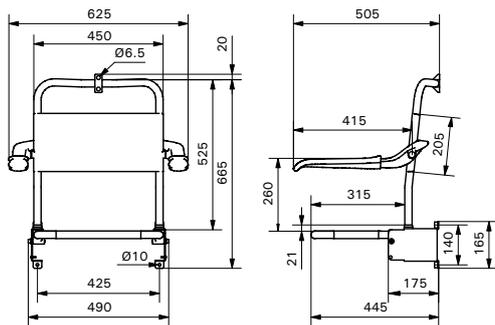

Duschsitz mit weichem Toilettensitz

Bodenstütze lieferbar: LI2214.001


LI2223.021

- Sitz komplett nach oben klappbar
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Einzeln hochklappbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Schienen für Bettpfanne Ø 300-315 mm

LI2221.021 (nicht abgebildet)

- wie LI2223.021, ohne Armlehnen und Rückenlehne (Aufbautiefe 500 mm)

△ Bodenstütze LI2214.001 wird empfohlen bei einem Körpergewicht > 100 kg und ist abhängig von der Struktur der Wand.

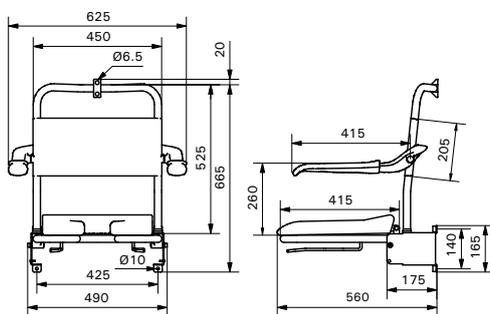


Einhängemodul für Duschsitze

LI2216.001

- Nur montierbar an die Ergogrip Wandhaltegriffe: LI2611.060, LI2611.070, LI2611.080, LI2611.160 und an: Dusch-, Wannenhandlauf LI2611.015/LI2611.016.
- Sicherheit durch Kunststoff-Verriegelung
- Passend zu Linido Duschsitzen LI2202.200 und LI2203.200
- Abstand Mitte Wandhaltegriff bis Oberseite Duschsitz 475 mm
- Rahmen aus Edelstahlrohr
- Ohne Werkzeug einfach einzuhängen und zu entfernen

△ Für das Eihängemodul empfehlen wir die Bodenstütze LI2214.201 zu verwenden.

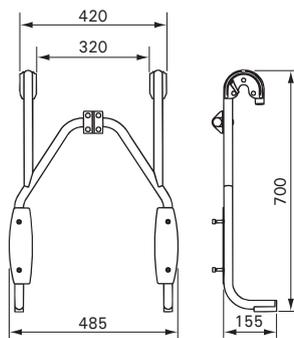


Einhängemodul für Duschsitze, höhenverstellbar

LI2216.002

- Wie LI2216.001, aber mit variabler Sitzhöhe
- Einstellbereich 100 mm
- Abstand Mitte Wandhaltegriff bis Oberseite Duschsitz: 400-500 mm

△ Für das Eihängemodul empfehlen wir die Bodenstütze LI2214.201 zu verwenden.

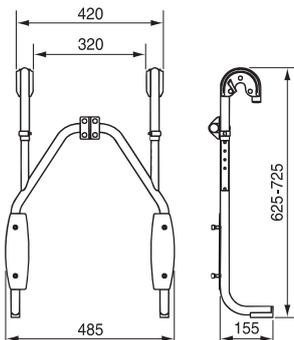


Das Eihängemodul für den Duschsitz zählt zu den Preisträgern auf der REHACARE 2005 in Düsseldorf. Diese Auszeichnung wurde durch das Forschungsinstitut Technologie-Behindertenhilfe (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein in der Kategorie „Innovations competition“ verliehen.



Komforthülle für Duschsitz

LI09506.400


- Abnehmbarer weicher Sitzbezug, passend zu LinidoSolutions Duschsitzen LI2201.200, LI2202.200 und LI2203.200
- Sitzbezug eignet sich speziell für empfindliche Haut oder für längere Nutzung des Duschsitzes
- Einfach mittels Klettband an der Unterseite des Duschsitzes zu befestigen
- Polyethylen-Polypropylenschaum
- Nur in der Farbe blau erhältlich

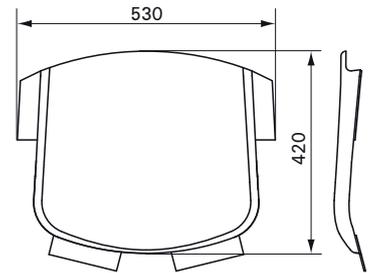

Höhenverstellung

LI2215.101


- Für Duschsitze ohne Rückenlehne LI2201.200, LI2201.001 & LI2201.021
- Stufenlose Höhenverstellung für optimale Sitzhöhe
- Duschsitz kann nachträglich montiert werden
- Höhenverstellung 150 mm
- Inklusiv Bohrschablone
- Satz verstellbare Klemmhebel lieferbar (LI2815.001)

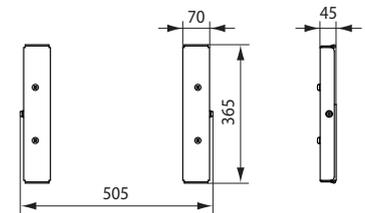

Höhenverstellung

LI2215.102


- Für Duschsitze mit Rückenlehne LI2202.200, LI2203.200, LI2203.001 & LI2223.021
- Stufenlose Höhenverstellung für optimale Sitzhöhe
- Duschsitz kann nachträglich montiert werden
- Höhenverstellung 150 mm
- Inklusiv Bohrschablone
- Satz verstellbare Klemmhebel lieferbar (LI2815.002)

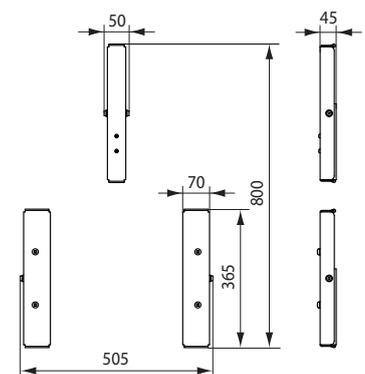

Konterplatten für Duschsitze

LI0122.508


- Für die „durch die Wand gehende“ Halterung von LinidoSolutions Duschsitzen
- Wird komplett mit aufgeschweißten M8 Muttern, passenden Gewindezapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert
- Zusätzliche Konterplatte zur Befestigung der Rückenlehne
- Konterplatte ist an der Rückseite der Wand sichtbar
- Nur in weiß lieferbar


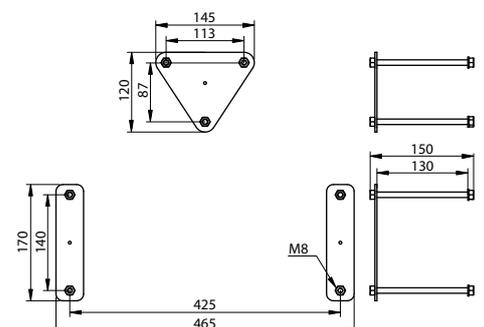


Duschsitz auf Stativ


LI2244.000

- Hochklappbarer Sitz
- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Auch lieferbar mit stufenloser Höhenverstellung (LI2254.000), Sitzhöhe min. 400 mm, max. 570

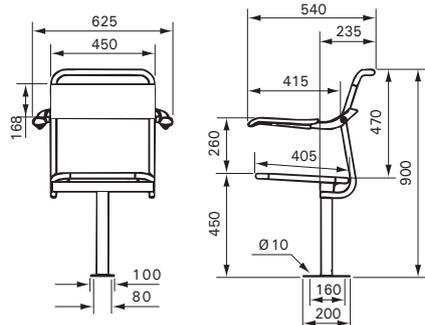

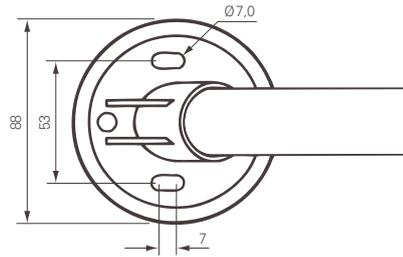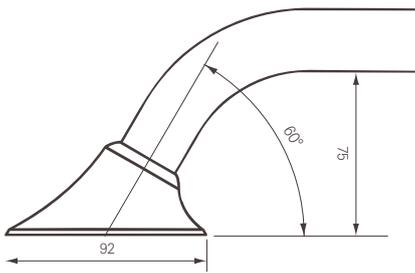


Alle Ergogrip Haltegriffe bestehen aus einem Stahl- oder Edelstahlrohr, einem Flansch aus Kunststoff und einer Kunststoffabdeckung. Durch die 60° Krümmung des Rohres ist es leichter, sich festzuhalten. In Verbindung mit dem Flansch hat der Ergogrip eine durchgängig glatte Form, die festen Halt bietet.

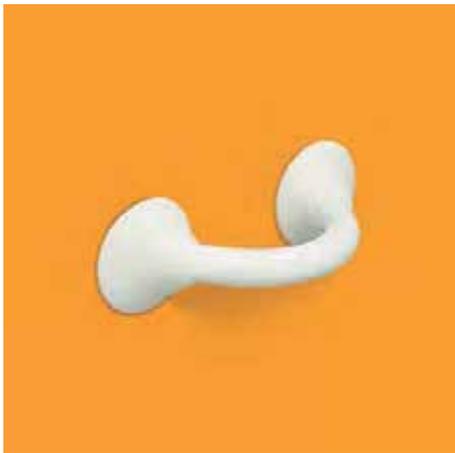

'Ergogrip' Wandhaltegriff

	Länge =	A	B	C
LI2611.020		180	200	275


- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2807.000)

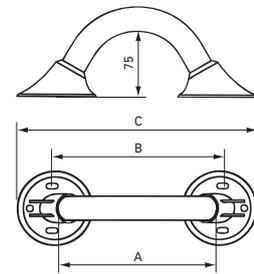

'Ergogrip' Wandhaltegriff


	Länge =	A	B	C
LI2611.030		300	317	405
LI2611.040		400	417	505
LI2611.050		500	517	605
LI2611.060		600	617	705
LI2611.070		700	717	805
LI2611.080		800	817	905
LI2611.090		900	917	1005
LI2611.100		1000	1017	1105
LI2611.120		1200	1217	1305
LI2611.140		1400	1417	1505

- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2807.000)

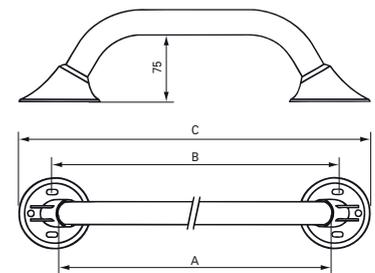

'Ergogrip' Wandhaltegriff (mit 3 Flanschen)


	Länge =	A	B	C
LI2611.160		1600	1617	1705
LI2611.180		1800	1817	1905
LI2611.200		2000	2017	2105

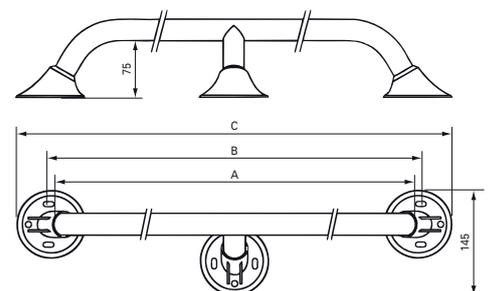

Dusch-, Wannenhandlauf

LI2611.015


- Für zwei Wände (Innenecke)

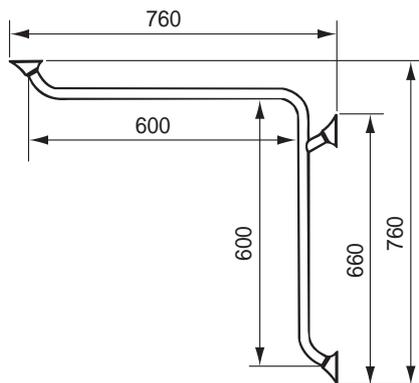

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehaltestange

LI2611.016


- Die vertikale Brausehaltestange kann durch einen verschiebbaren Verbindungsblock in jeder gewünschten Position des Dusch- und Wannenhandlaufes befestigt werden
- In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200) eignet sich dieser Griff als sichere Duschhalterung
- Kunststoff-Verbindungsblock nur in weiß erhältlich

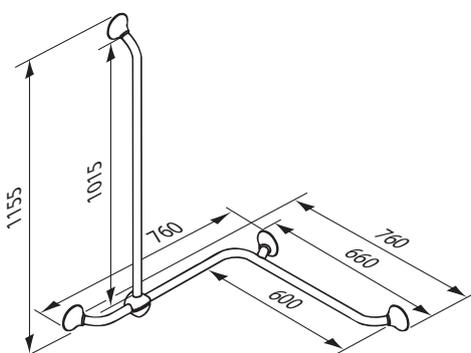

Vertikaler Kombihaltegriff

LI2611.017

- Kombinierbar mit jedem Ergogrip - Wandhaltegriff. Die ideale Position kann selbst bestimmt werden
- In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200) eignet sich dieser Griff als sichere Duschhalterung
- Kunststoff-Verbindungsblock nur in weiß erhältlich


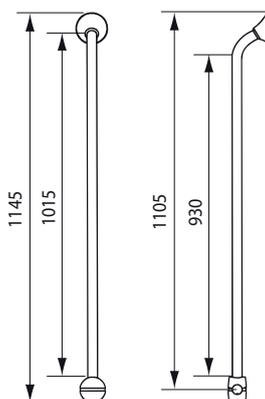


Wandhaltegriff 90 Grad mit Brausehaltestange

A: LI2611.003

B: LI2611.004

- Geeignet für die Montage in der Dusche und an der Badewanne
- In Verbindung mit der Brausehalterung (LI2630.200) eignen sich diese Griffe als sichere Halterung beim Duschen

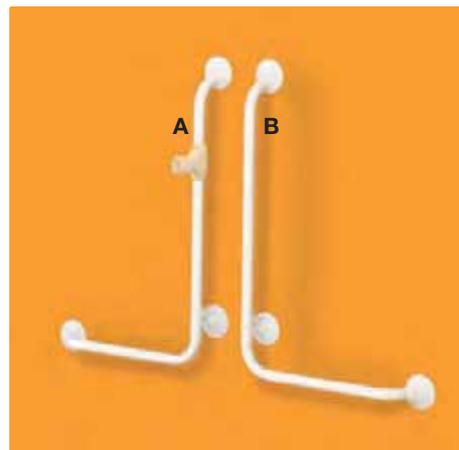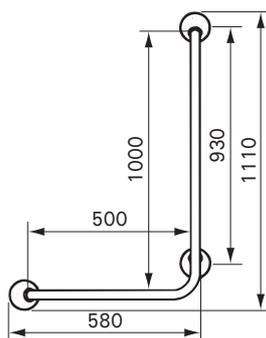





Wandhaltegriff 45 Grad

A: LI2611.007

B: LI2611.008

- Geeignet zur Montage in Nähe der Toilette und Badewanne

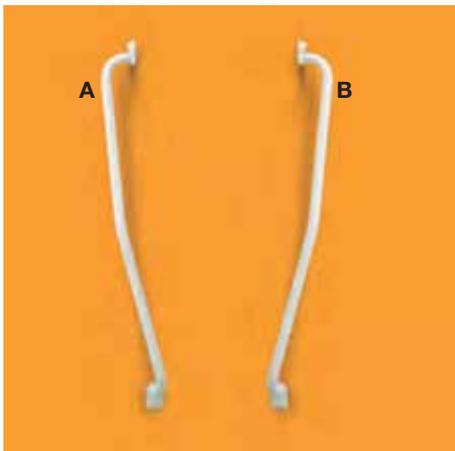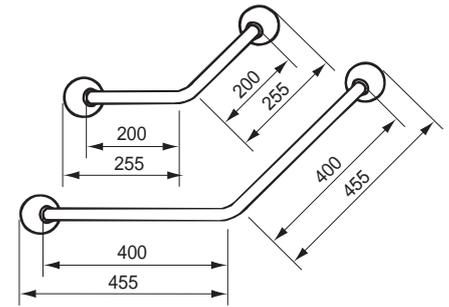


Wandhaltegriff für Treppenspindel

A: LI2611.011

B: LI2611.012


- Für zwei Wände (Außenecke) oder für Treppenspindel

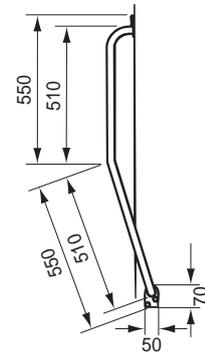

Wandhaltegriff für Türrahmen

	Länge =	A	B	C	D
LI2619.030		300	280	240	215
LI2619.045		450	430	390	365
LI2619.060		600	580	540	515


- Durch den schmalen Flansch besonders zur Montage an Türrahmen geeignet
- Rohrdurchmesser 22 mm
- In den angegebenen Abmessungen lieferbar
- Nur in weiß erhältlich

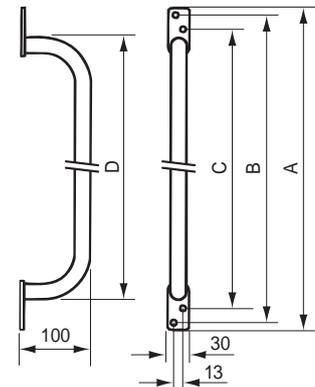

Konterplatte

LI0126.503

- Für die „durch die Wand gehende“ Halterung vom Ergogrip - Wandhaltegriff
- Wird komplett mit aufgeschweißten M6-Muttern, passenden Gewindestapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert
- Konterplatte ist an der Rückseite der Wand sichtbar
- Nur in weiß erhältlich

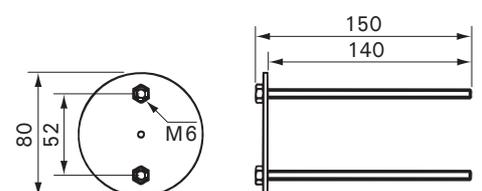


ProGrip

LI4026.001 ProGrip, rechts

LI4026.002 ProGrip, links

- Aufstehhilfe in einer Toilette
- Unterstützt den Unterarm während des Bewegungsablaufes von der Sitz- bis zur Stehposition und umgekehrt
- Erhöht die Selbstständigkeit bei der Benutzung einer Toilette
- Ergonomisch geformt
- Aus Polyurethanschaum mit Aluminiumbefestigung

Weitere Informationen finden Sie unter www.handicare.com

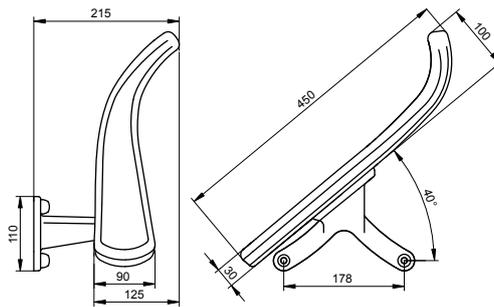

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 1: Beugephase

Der Körperschwerpunkt wird nach vorn gerichtet

Phase 2: Transfermoment

Der Körper muss ins Gleichgewicht gebracht werden - die Balance spielt eine wichtige Rolle

Phase 3: Aufstehphase

Die verbleibende Muskelkraft wird aktiviert



Phase 4: Stabilisierung

Ein Haltegriff ist notwendig, um Stehen bleiben zu können

Back-Up

LI4027.000 Back-Up

- Bietet den nötigen Halt während des Duschens im Stehen
- Beide Hände sind frei, z. B. für Haare waschen, abtrocknen oder Drehen auf der Stelle
- Ergonomisches Design, welches den natürlichen Kurven des Körpers folgt
- Aus Polyurethanschaum mit Aluminium-Befestigung
- Kann als rechts und als links Version verwendet werden
- Befestigung kann als Ablagefläche genutzt werden

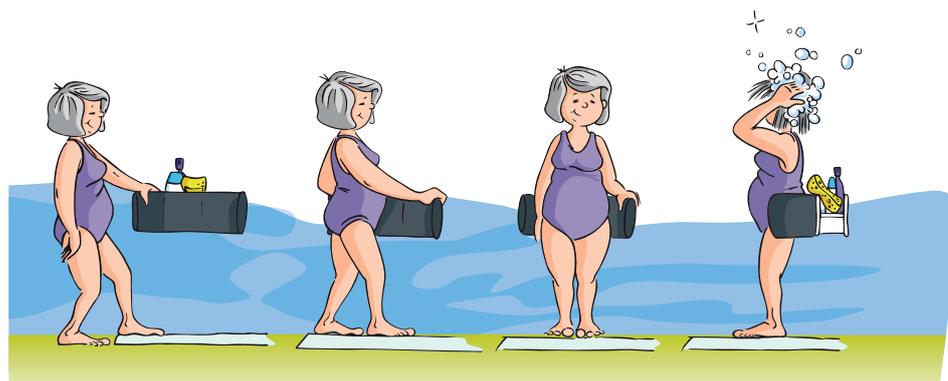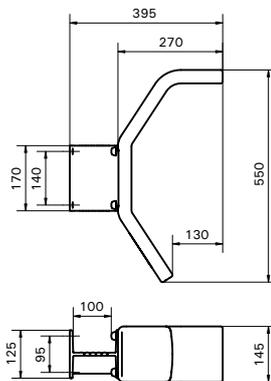




Stützgriff

- LI2601.050** Länge 500 mm
- LI2601.060** Länge 600 mm
- LI2601.070** Länge 700 mm
- LI2601.080** Länge 800 mm
- LI2601.090** Länge 900 mm


- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2806.000)

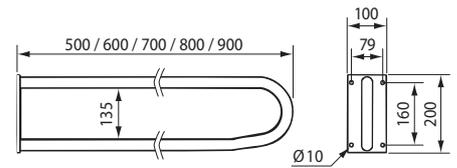

Stützklappgriff

- LI2603.350** Länge 530 mm
- LI2603.360** Länge 600 mm
- LI2603.370** Länge 700 mm
- LI2603.380** Länge 800 mm
- LI2603.390** Länge 900 mm


- Arretiert automatisch in vertikaler Stellung und ist in dieser Position auch als Stützgriff verwendbar.
- Kunststoffwandplatte mit beschichtetem Stahlrohr. Rohr auch aus Edelstahl beschichtet oder poliert erhältlich
- LinidoSolutions Befestigungssätze lieferbar (LI2806.000)

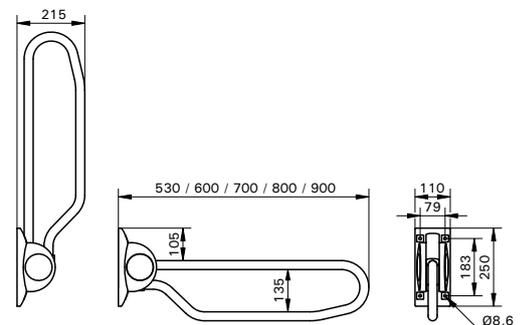

Stativ zur Bodenmontage von Stützklappgriffen

LI2608.000


- Geeignet, falls die Wandmontage der Stützklappgriffe nicht möglich oder nicht erwünscht ist
- Inklusive Platte und Aluminium-Klemmen für Montage der Stützklappgriffe
- Der Stützklappgriff kann auf dem Stativ in der Höhe stufenlos verstellbar montiert werden

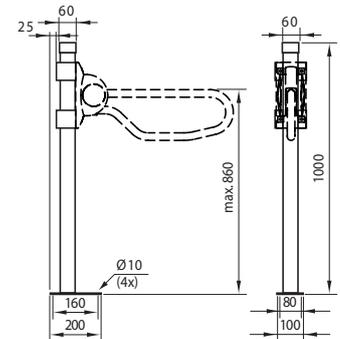

Frontstütze

LI2609.200


- Anwendbar als Frontstütze, so wie auch als eingehängte Armunterstützung, in Verbindung mit zwei Stützgriffen (LI2601.0xx) oder zwei Stützklappgriffen (LI2603.3xx)
- Kann in neue bzw. vorhandene Anlagen eingebaut werden
- In der Tiefe verstellbar, seitliche Verriegelung
- Ergonomisch geformte Polyurethan-Ummantelung
- Abwaschbar
- Zusätzliche Sicherheit, einfach montiert

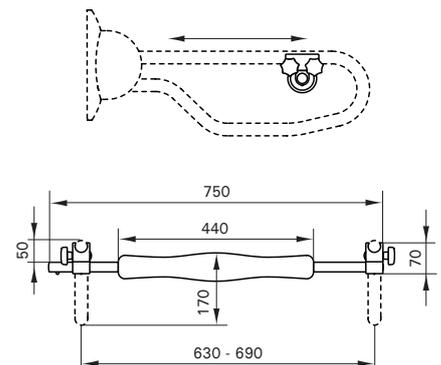

Polyurethan Armpolster

LI2610.001


- Passend für alle LinidoSolutions Stützgriffe (LI2601.0xx) und Stützklappgriffe (LI2603.3xx)
- Inklusive Klebesatz
- Nur in schwarz erhältlich

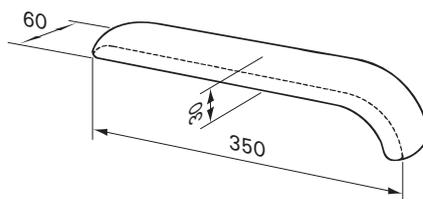

Bodenstütze für Stützklappgriffe

LI2614.300


- Für verstärkte Sicherheit bei Leichtbau-Wänden
- Bestehend aus Bodenstütze, Distanzhalter und Befestigungsschellen
- Stufenlose Höhenverstellung der Stütz(klapp)griffe von 700 mm bis 850 mm (Maß: Boden bis Oberkante Griff)
- Gelenkarm-Unterstützung (LI2603xx) kann nachgerüstet werden
- Nicht anwendbar bei LI2603.350

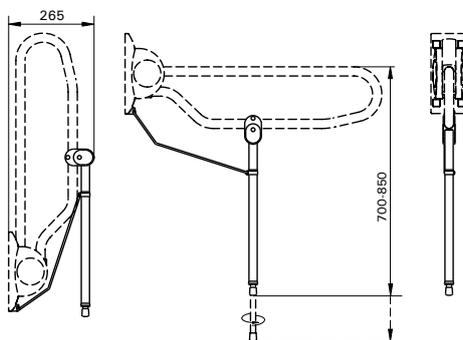

Höhenverstellung für Stützklappgriffe

LI2615.300


- Für LinidoSolutions Stützklappgriffe
- Stufenlose Höhenverstellung für optimale Stützhöhe
- Stützklappgriff kann nachträglich montiert werden
- Höhenverstellung 150 mm
- Satz verstellbare Klemmhebel lieferbar (LI2815.001)

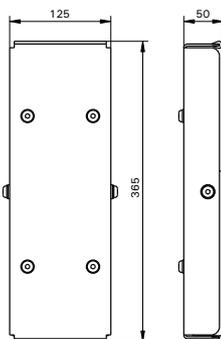

Konterplatten

LI0126.501

- Zur „Durch und Durch“ Befestigung von LinidoSolutions Stützklappgriffe (LI2603.3xx) an der Wand-Rückenseite
- Wird komplett mit aufgeschweißten M8-Muttern, passenden Gewindezapfen, Unterlegscheiben und Befestigungsmuttern geliefert
- Konterplatte an Rückseite der Wand sichtbar
- Nur in weiß erhältlich

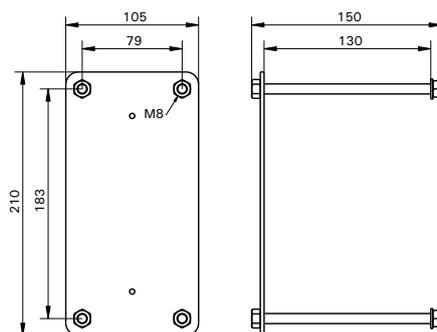




Toilettenpapierhalter

LI2617.000



- Polierter Edelstahl mit schwarzer Kunststoffklemme zur Befestigung an LinidoSolutions Stützgriffen (LI2601.xxx), Stützklappgriffen (LI2603.3xx) oder 'Ergogrip' Wandhaltegriffen (LI2611.xxx)

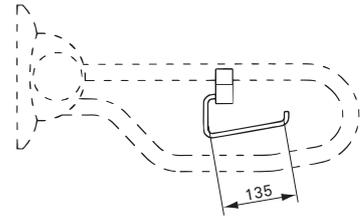

Toilettenpapierhalter, einhändig zu bedienen

LI2618.000

- Kunststoff - Toilettenpapierhalter, bei dem der Benutzer mit einer Hand das Toilettenpapier wechseln, abrollen und abreißen kann
- Passend für alle LinidoSolutions Stützgriffe (LI2601.0xx), Stützklappgriffe (LI2603.3xx) oder 'Ergogrip' Wandhaltegriffe (LI2611.xxx), ab 40 Zm
- Nur in weiß erhältlich

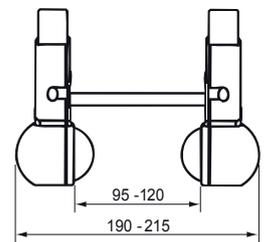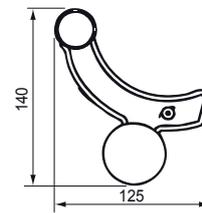

Gewinner des Fireva Design Award 2002. für fortschrittliche und moderne Hilfsmittel; nominiert für den VSK Award 2004 in der Kategorie "Sanitär Produkte"



Optionen für Stütz(klapp)griffe

- Verschweißte Zapfen, z.B. zur Halterung von Klingel mit Öffnungen zur Kabeldurchführung (exklusive Klingel und Kabel)
- Verschweißte Toilettenpapierhalterung
- Bei einem Griff auch mehrere Optionen möglich (siehe Preisliste)



Optionen für Stütz(klapp)griffe

- Eingeschweißte Nocken für pneumatische Bedienung des Spülkastens (exklusive pneumatische Bedienung)
- Verschweißte Toilettenpapierhalterung
- Bei einem Griff auch mehrere Optionen möglich (siehe Preisliste)






Duschkopfhalterung

LI2630.200


- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Passend für alle Ergogrip Wandhaltergriffe ab 30 cm; macht aus jedem Ergogrip eine sichere Duschstange
- Kann auch nachträglich montiert werden
- Leicht und einfach über die gesamte Länge verstellbar
- Ergonomische Form
- Für konisch geformte Hülsen des Brauseschlauchs

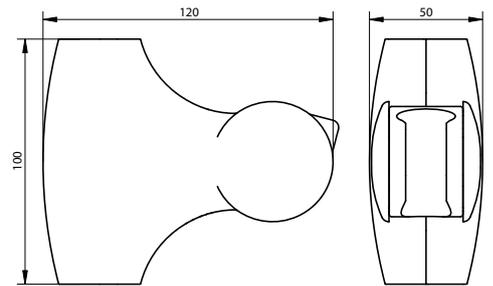

WC-Bürstengarnitur

LI2631.000


- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

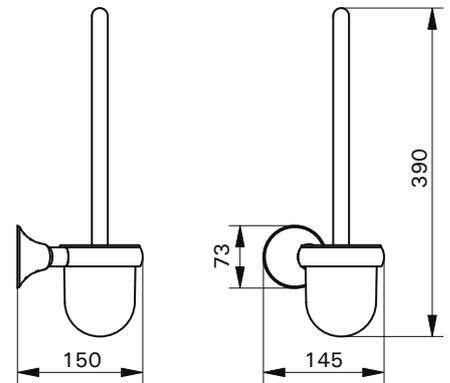

Zahnbürstenhalter

LI2632.000


- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Einschließlich transparentem Becher
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

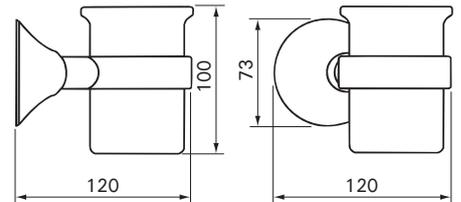

Seifenschale

LI2633.000


- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

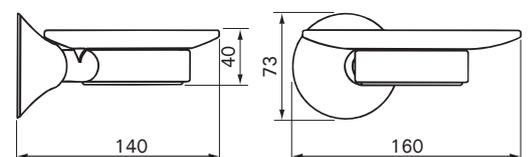

Ablage

LI2634.000


- Kunststoffablage
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

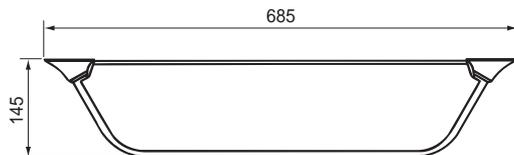

Wandtoilettenpapierhalter

LI2635.000

- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Auch geeignet als Halter für Reserverolle Toilettenpapier
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

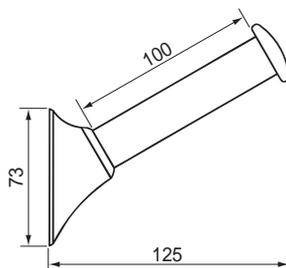


Handtuchhalter

LI2636.000 (Einzel)

LI2636.001 (Doppel)

- Vollständig aus Kunststoff gefertigt
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl

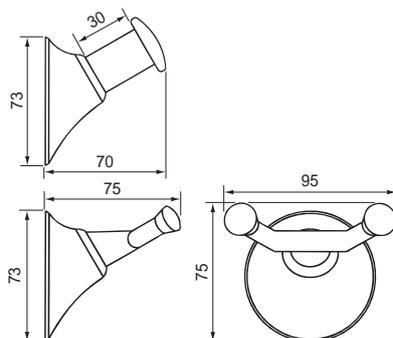


'Ergogrip' Wandhaltegriff mit Handtuchhalter

LI2637.001 (300 mm)

LI2637.002 (600 mm)

- Kombination von Handtuchhalter und Wandhaltegriff
- Oberes Rohr kann als Haltegriff (ErgoGrip) verwendet werden

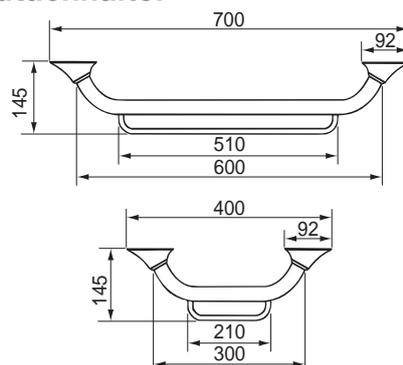




Duschvorhangstange

LI2641.000


- Für Eckdusche
- Ohne Vorhang und Ringe

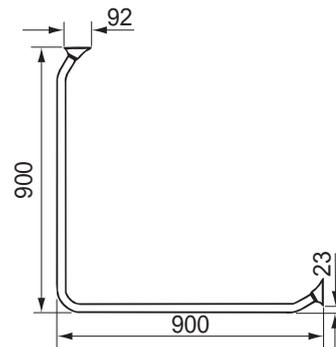

Deckenabhängung für Duschvorhangstange

LI2641.100



- Wird empfohlen, falls die Stange länger als die Standardausführung LI2641.000 ist
- Kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden

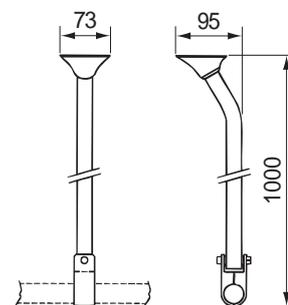

Sicherheitsgriffe für Kippspiegelmontage

LI2642.001


- Set bestehend aus 2 Haltegriffen (400mm) inkl. Spiegelbefestigung
- Für fast alle rahmenlose Spiegel geeignet
- Wird ohne Spiegel geliefert
- Empfohlene Maße für Spiegel:
Rund: max Ø 60 Zm
Recht: max 60 x 40 Zm
Dicke: max 6 Mm

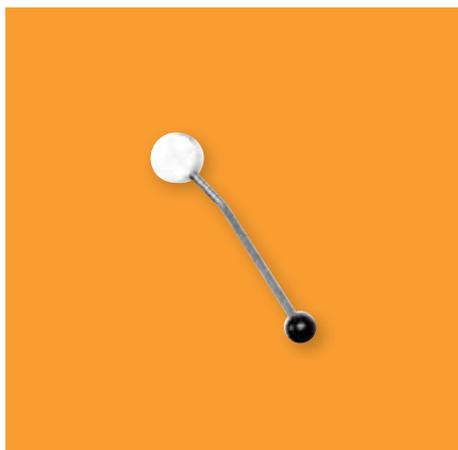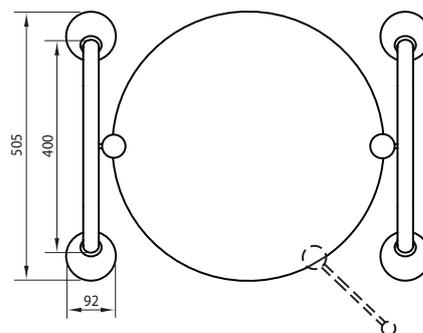

Kippspiegelhebel

LI2642.002


- Hebel zum Kippen des Spiegels

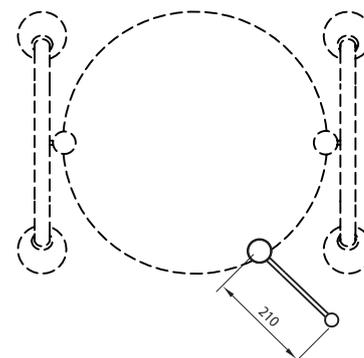

Handgriff zur Deckenmontage

LI2612.000


- Zur Deckenmontage
- Platte für Deckenmontage mit Nylongurt in der Länge stufenlos einstellbar, mit Kunststoff-Griff

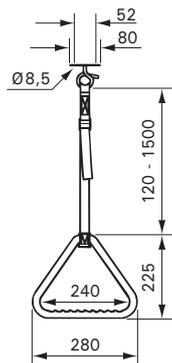

Wegschwenkbarer Aufrichter

LI2613.000

- Zur Wandmontage
- Kann auch im Liegen vom Benutzer selbst bedient werden
- Gurtlänge 1500 mm
- Arretierbar in 0, 45, 90, 135 und 180 Grad
- Nylongurt in der Länge stufenlos einstellbar, mit Kunststoff-Griff

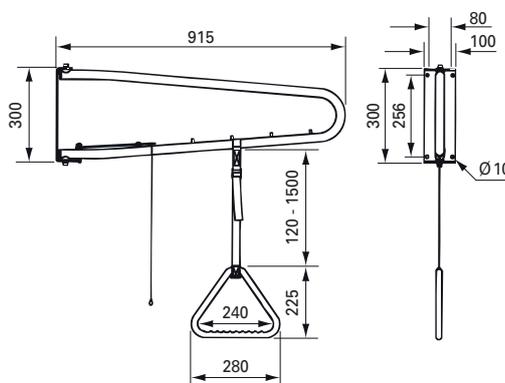


Rückenstütze

LI2701.200

LI2703.200

- Zur Wandbefestigung hinter einer Toilette mit einem hoch aufgehängten Spülkasten
- Bietet dem Anwender die Möglichkeit sich anzulehnen
- In Neigung und Tiefe verstellbar
- Lieferbar wie Rückenstützen LI2701.200 und LI2703.200, jedoch für Montage bei Unterputzspülkasten als LI2705.200 Spezifikationen auf Wunsch


	A
LI2701.200	195 - 250
LI2703.200	280 - 415

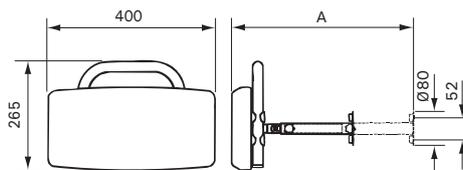

Rückenstütze

LI2705.200

- Zur Wandbefestigung hinter einer Toilette mit einem eingebauten Spülkasten
- Bietet dem Anwender die Möglichkeit sich anzulehnen

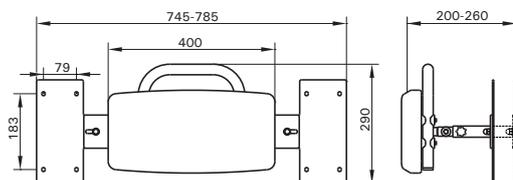




Waschbeckenstütze

LI2606.000


- Rundumlaufende Stütze für das Waschbecken
- Angebot für Sondermaße auf Anfrage

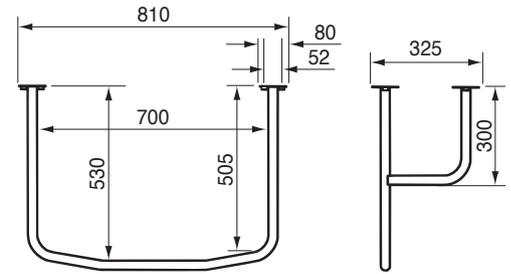

Waschbeckenmodul

LI3012.000

- Für stufenlose Höhen- und Tiefenverstellung eines Waschbeckens durch eine Gasdruckfeder
- Einfache Bedienung mit großem Verstellbereich: 250 mm Höhe und 86 mm Tiefe.
- Passend für alle Standardwaschbecken mit planer Rückseite und einem Gewicht von min. 15 kg und max. 18 kg.
- Ohne Waschbecken, Hahn und flexiblem Zu- und Ablauf
- Nur in weiß erhältlich

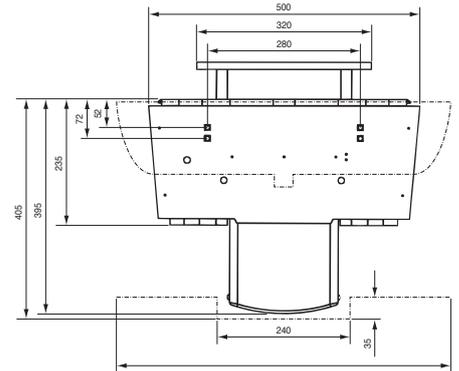

Flexible Zu-/Abflussgarnitur

LI3013.000

- Flexible Zu-/Abflussgarnitur für das Waschbeckenmodul passend für \varnothing 40 mm Anschlüsse inklusive Verbindungselement für Standard-Waschbecken und Waschbeckenmodul LI3012.000
- 150 cm langer Abflussschlauch
- Zwei flexible Schläuche 50 cm lang mit rostfreiem Stahlgewinde für Kalt- und Warmwasser. An den Enden mit 3/8" und 10 mm Anschlüssen versehen.
- Siphon zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage
- Nur in weiß erhältlich



Bettpfanne & Eimer

Bettpfanne LI02979.411

- Edelstahl, \varnothing 300 mm
- Mit Deckel und Henkel

Eimer LI02979.430


- Edelstahl, \varnothing 300 mm
- Mit Deckel und Henkel

Duschrahmen/Anziehliege


LI2403.150, LI2403.170 und LI2403.190

- Liegefläche mit HT-Bespannung
- Zur Wandmontage (nach oben und unten klappbar)
- Wegschwenkbare Bodenstützen
- Inklusive Halterung zur Sicherung der hochgeklappten Liege
- Lieferbar mit verstellbarer Rückenlehne mit Gasdruckfeder (LI2404.150, LI2404.170 und LI2404.190)
- Lieferbar mit Kunststoffwanne mit flexiblen Abflussschlauch (LI2407.150, LI2407.170 und LI2407.190)
- Lieferbar mit verstellbarer Rückenlehne mit Gasfeder und mit Kunststoffwanne mit flexiblen Abflussschlauch (LI2408.150, LI2408.170 und LI2408.190)
- Angebot für abweichende Maße auf Anfrage

	A	B
LI2403.150	1490	185
LI2403.170	1690	285
LI2403.190	1890	385

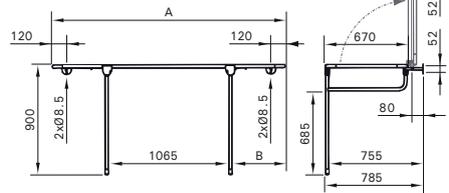

	A	B	C
LI2407.150	1490	465	185
LI2407.170	1690	615	285
LI2407.190	1890	615	385

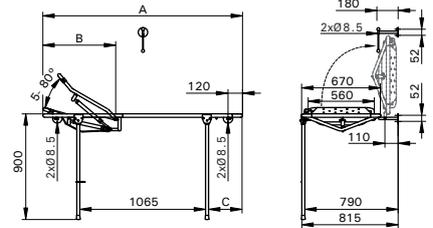


Zeichnungen mit Maßangaben von LI2407 und LI2408 (nur nach oben klappbar) auf Wunsch erhältlich oder siehe www.handicare.com.


Höhenverstellbare Duschliege

LI2514.150, LI2514.170 und LI2514.190

- Liegefläche mit HT-Bespannung
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder
- Kunststoffwanne mit flexiblen Abflussschlauch, l = 1000 mm
- Hydraulisch höhenverstellbar
- Zwei klappbare Seitengitter
- Lieferbar in den angegebenen Maßen
- Lieferbar ohne verstellbare Rückenlehne (LI2513.150, LI2513.170 und LI2513.190)

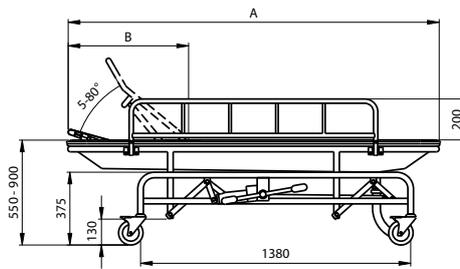


	A	B
LI2514.150	1505	465
LI2514.170	1705	615
LI2514.190	1905	615

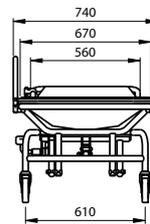

Einsteck- & klappbares Seitengitter


A: Einsteckseitengitter LI2490.125

- Geeignet für alle LinidoSolutions Duschrahmen und Duschliegen
- Inklusive Kunststoffbefestigungsklammern

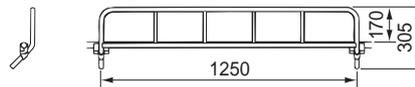

B: Klappbares Seitengitter LI2590.125

- Geeignet für alle LinidoSolutions Duschrahmen und Duschliegen
- Inklusive Kunststoffbefestigungsklammern

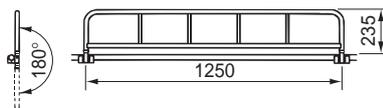



Sicherheitsgriffe für Kippspiegelmontage – Seite 20

Ablage – Seite 19

Zahnbürstenhalter – Seite 18

Waschbeckenmodul – Seite 22

Seifenschale – Seite 18

Flexible Zu-/Abflussgarnitur – Seite 22

Handtuchhalter – Seite 19

Kippspiegelhebel – Seite 20

Stützklappgriff – Seite 14

Toilettenpapierhalter, einhändig zu bedienen – Seite 16

Komfort-Sitz – Seite 31

Duschhocker mit Armlehnen – Seite 28






Kantelbarer Dusch-/Toilettenstuhl

LI2150.021


- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Verstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
- Schienen für Bettpfanne oder Eimer Ø 300-315 mm
- Stufenlose Sitzneigung mittels Gasdruckfeder bis zu 30°
- Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze
- Inklusive Wadenband und Lumbalstütze
- WC-überfahrbar (max. WC-Höhe 450 mm)

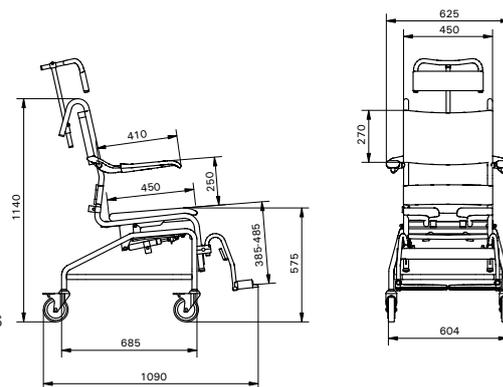

Höhenverstellbarer, kantelbarer Dusch-/Toilettenstuhl

LI2161.321

- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Verstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußstützen
- Abnehmbarer und umkehrbarer Toilettensitz: Hygieneausparung nach Wahl an Vorder- oder Hinterseite, Polyurethanschäum
- Abnehmbare Schienen für Eimer Ø 300-315 mm
- Elektrische Steuerung für Verstellung der Sitzhöhe von 580 bis 1040 mm
- Elektrische Steuerung für stufenlose Sitzneigung bis zu 35°
- Inklusive Beckengurt, Wadenband und Lumbalstütze
- Höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze
- WC überfahrbar

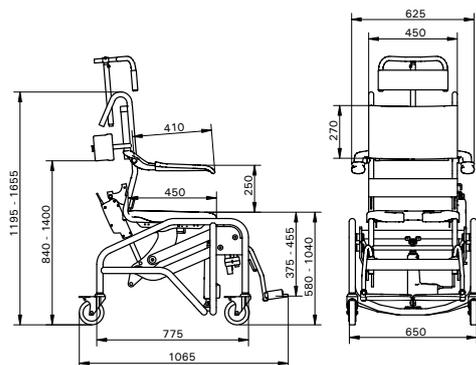

LI2161.121


- Wie LI2161.321, aber mit hydraulischer Höhenverstellung und Kippverstellung mittels Gasdruckfeder



Dusch-, Toilettenstuhl, hoch belastbar

LI2137.521 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 610 mm

- Rahm: Breite 600 mm, Tiefe 500 mm
- Extra Rahmenverstärkung
- Maximales Benutzergewicht: 300 kg
- Einzel abklappbare Armlehnen, automatische Arretierung
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
- Schienen für Bettpfanne oder Eimer Ø 300-315 mm
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Verstellbare und hochklappbare durchgehende Fußstütze

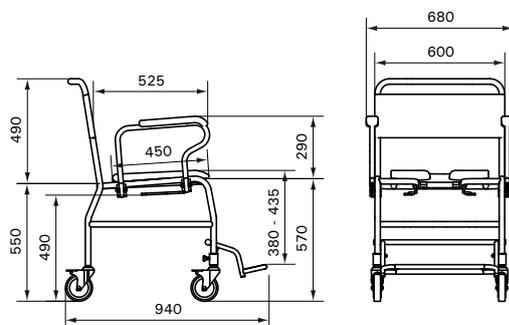


Dusch-, Toilettenstuhl

LI2135.011 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 610 mm

LI2135.111 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 530 mm

- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit geschlossener Vorderseite
- Schienen für Bettpfanne oder Eimer Ø 300-315 mm
- Lieferbar mit Sitz mit offener Vorderseite (LI2135.021 und LI2135.121)
- Lieferbar mit Lenkrädern (LI2136.011, LI2136.111, LI2136.021 und LI2136.121)

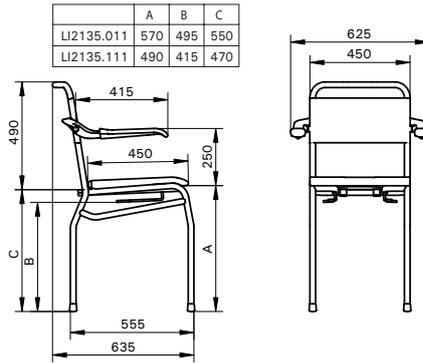


Dusch-, Toilettenstuhl mit Lenkrädern

LI2137.021 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 610 mm

LI2137.121 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 530 mm

- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
- Schienen für Bettpfanne oder Eimer Ø 300-315 mm
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Verstellbare hochklappbare Fußstützen
- Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite (LI2137.011 und LI2137.111)

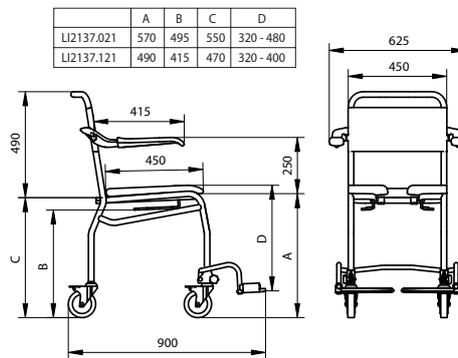


Dusch-, Toilettenrollstuhl

LI2138.021 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 610 mm

LI2138.121 Sitzhöhe (inkl. Sitz) 530 mm

- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Hochklappbarer weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite
- Abstand Wand – Mitte Toilettenöffnung: 545 mm
- Schienen für Bettpfanne oder Eimer Ø 300-315 mm
- Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse und 24" Antriebsräder aus Kunststoff mit Greifreifen
- Verstellbare hochklappbare Fußstützen
- Lieferbar mit Sitz mit geschlossener Vorderseite (LI2138.011 und LI2138.111)

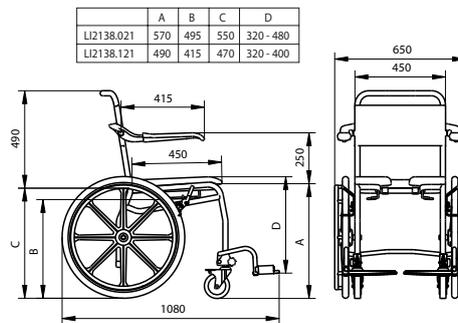

Weiche Toilettensitze


LI0121.904 Weicher Toilettensitz mit offener Vorderseite

LI0121.905 Weicher Toilettensitz mit geschlossener Vorderseite

- Nur für LinidoSolutions Dusch- und Toilettenstühle, nicht für 'Trento' geeignet
- Polyurethanschaum (graphit)

LI09506.306 Füllstück für weiche Toilettensitze

- Nur für weiche LinidoSolutions Toilettensitze LI0121.904 und LI0121.905
- Polyurethanschaum (graphit)

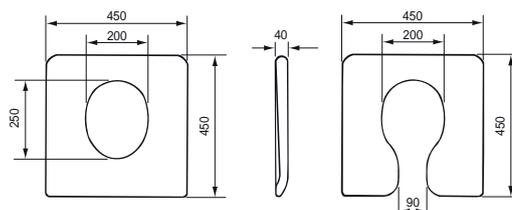




Duschhocker mit Armlehnen

LI2002.000


- Weicher, abnehmbarer Sitz mit Aussparungen zum Wasserablauf
- Feste Armlehnen
- Höhenverstellbar in 8 Schritten, kein Werkzeug erforderlich
- Sitzhöhe 415-585 mm

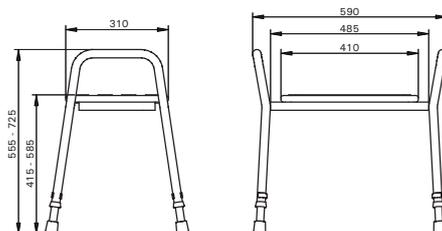

Rückklapp- Unterstützung für Duschhocker

LI2002.001

- Separate Rückenlehne für Duschhocker LI2002.000, kann ohne Werkzeug montiert werden
- Weiche Rückenlehne
- Mit integriertem Griff

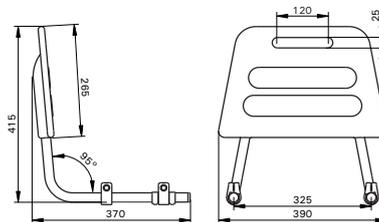


Duschstuhl

LI2139.000 Sitzhöhe 540 mm

LI2139.100 Sitzhöhe 490 mm

- Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Auch lieferbar mit Lenkrädern (LI2140.000 und LI2140.100)

	A	B
LI2139.000	540	520
LI2139.100	490	470

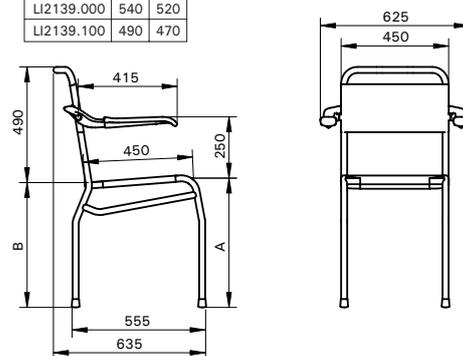


Duschstuhl mit Lenkrädern

LI2141.000 Sitzhöhe 540 mm

LI2141.100 Sitzhöhe 490 mm

- Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Vier Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse
- Verstellbare hochklappbare Fußstützen

	A	B	C
LI2141.000	540	520	280 - 410
LI2141.100	490	470	280 - 360

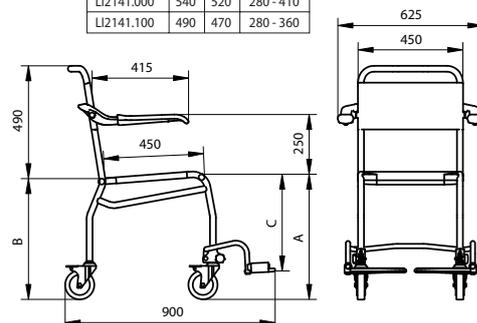


Duschrollstuhl

LI2142.000 Sitzhöhe 540 mm

LI2142.100 Sitzhöhe 490 mm

- Sitz und Rückenlehne mit HT-Bespannung
- Einzel hochschwenkbare ergonomisch geformte Armlehnen
- Lenkräder aus Edelstahl Ø 125 mm mit Bremse und 24" Antriebsräder, Kunststoff, mit Greifreifen
- Verstellbare hochklappbare Fußstützen

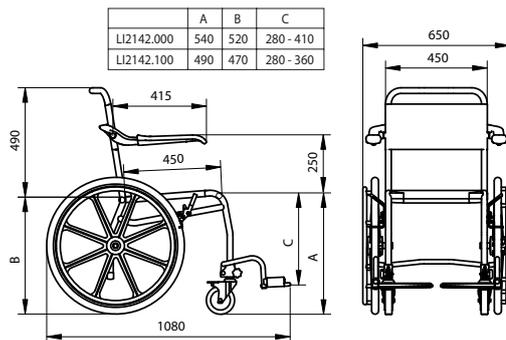

Optionen für Stühle

Nachfolgende Optionen sind bei der Produktserie 'Trento' nicht möglich.

Zentral bedienbare Bremse

- Wirkt auf beide Hinterräder
- Links- und rechtshändig zu bedienen
- Nicht für Duschrollstuhl und Dusch-, Toilettenrollstuhl LI2150.021 und LI2161.xxx

Schwenkbare Armlehnen mit Stütze vorn

- Einzel hochschwenkbare Armlehnen
- Anstelle der Standardarmlehnen
- Nicht nachrüstbar

Einzel höhenverstellbare und wegschwenkbare Fußstützen

- Geeignet für alle Linido Dusch- und Toilettenstühle, nicht für LI2161.121 und LI2161.321






Schwimmbad-Lifter Stuhl

LI2141.108 Sitzhöhe 490 mm


- Sitz und Rückenlehne HT-Abdeckmaterial
- Öffnungen für Schwimmbad-Lifter an Rückenlehne und an den vorderen Beinstützen
- einzeln hochschwenkbare Armlehnen, ergonomische Form
- Armlehnen aus Aluminium weiß beschichtet
- Vier Rollen aus Edelstahl Ø125 mm, doppelt gebremst
- Einstellbare, nach oben wegklappbare Fußstützen
- Nur in Sitzhöhe 490 mm
- Nur in poliertem Edelstahl 316

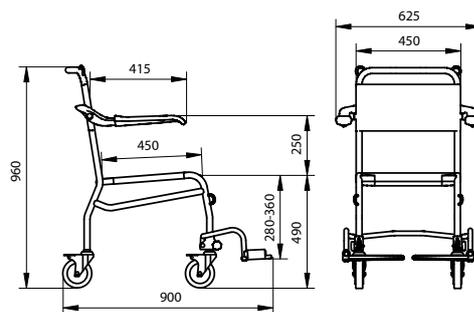

Schwimmbad-Lifter Rollstuhl

LI2142.108 Sitzhöhe 490 mm


- Sitz und Rückenlehne HT-Abdeckmaterial
- Öffnungen für Schwimmbad-Lifter an Rückenlehne und an den vorderen Beinstützen
- einzeln hochschwenkbare Armlehnen, ergonomische Form
- Armlehnen aus Aluminium weiß beschichtet
- Rollen aus Edelstahl Ø125 mm, doppelt gebremst und 24" Antriebsräder aus Kunststoff mit Greifreifen
- Einstellbare, nach oben wegklappbare Fußstützen
- Nur in Sitzhöhe 490 mm
- Nur in poliertem Edelstahl 316

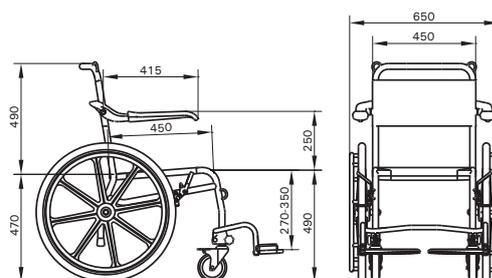

Schwimmbad Duschwagen

LI2514.198


- HT Bespannung
- Vier Rollen aus Edelstahl Ø125 mm, doppelt gebremst
- Verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder
- Höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe mit Rechts- und Linkshand-Betrieb
- Zwei drehbare Seite Gitter
- Oberer Rahmen mit Einlage kann aus dem unteren Rahmen gehoben werden. Einlage mit Öffnungen für Hebevorrichtung
- Nur in den genannten Dimensionen und Länge 1900 mm
- Nur in poliertem Edelstahl 316

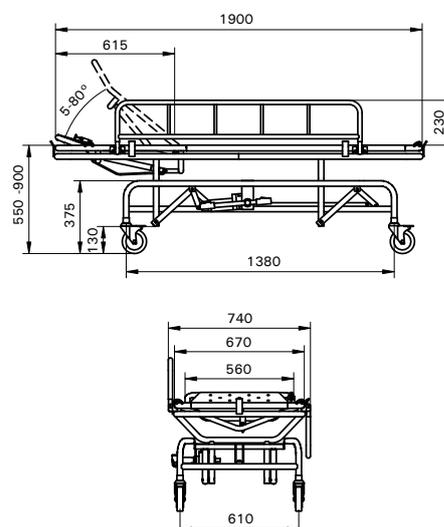

Komfort-Sitz

LI09506.316

- Weicher Toilettensitz für Personen, die länger auf der Toilette sitzen müssen und/oder eine empfindliche Haut haben.
- Zwei Schaumstoffsorten mit wasserdichter Beschichtung
- Inklusive Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Nur in graphit lieferbar, ohne Deckel

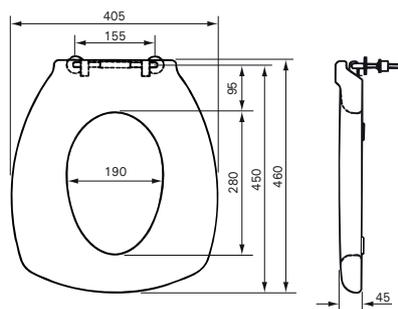

Notizen

Pflege

Produkte, die in der Dusche oder in der Badewanne benutzt werden, sollten nach Gebrauch mit klarem Wasser abgespült werden. Alle Produkte können mit milden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Garantie

Wir gewähren auf alle Produkte eine Herstellergarantie von fünf Jahren. Ausgenommen davon sind der weiche Duschsitzüberzug (LI09506.400) und Teile aus Neopren. Hier beträgt die Herstellergarantie ein Jahr. Die Herstellergarantie gilt nur, wenn die Produkte lt. Zweckbestimmung genutzt werden und baulich nicht verändert wurden.

CE Alle LinidoSolutions Serienprodukte entsprechen den CE-Richtlinien und den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und deren nationaler Umsetzung, in Deutschland das Medizinproduktegesetz (MPG), und NEN- EN 12182.

Materialspezifikation

- Stahl ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm
- Stahl ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
- Edelstahl AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
- Edelstahl AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
- Edelstahl AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
- Kunststoff Duschsitz: glasfaserverstärktes Nylon
- Wandflanschen des Ergogrips und Wandplatte der hochklappbaren Bügelstützen: glasfaserverstärktes Nylon
- Kunststoff Badezimmerzubehör: PMMA
- Wandplatte der Duschsitz: Edelstahl AISI 304

Bewegliche Teile und Scharnierteile sind aus Edelstahl oder Kunststoff hergestellt.

Vorbereitung beim Beschichten

Vor dem Beschichten wird der Stahl mit einer Lauge entfettet, phosphatiert und passiviert.

Beschichtung

Epoxidharzpolyesterbeschichtung, 80-100 µm dick. Wasser- und schlagbeständig (Buchholz Härte, getestet nach DIN 53153: > 80). Erfüllt die Kriterien des Salznebeltestes DIN 50021/ ASTM B117 (1000 Stunden, < 1mm).

HT-Bespannung

- Weißer Nylonstoff mit Kunststoffbeschichtung. Kein Verschleiß, leicht zu reinigen.
- Hautverträglichkeit - Schlussfolgerung der durchgeführten Prüfung: Unter Betracht der berichteten Daten dieser Verträglichkeitsprüfung kann festgestellt werden, dass das Material in die niedrigste Kategorie einzustufen ist und praktisch keine lokalen Gewebereaktionen hervorruft.

Isolierungssätze

Wegen der erforderlichen elektrischen Isolierung werden die Produkte zur Wand- oder Bodenmontage, deren Befestigungsflanschen oder -platten nicht in Kunststoff ausgeführt sind, mit einem Isolierungssatz inklusive weiße Abdeckkappen geliefert.

Befestigungsmaterialien

Die Produkte werden ohne Befestigungsmaterialien geliefert, mit Ausnahme von Badezimmer-Accessoires. Die Wahl der Befestigungsmaterialien hängt von der Art der Wand ab. Für eine dauerhafte, verlässliche Befestigung raten wir Ihnen, ausschließ-

lich korrosionsbeständige Befestigungsmaterialien zu verwenden. Ein Datenblatt für diverse Befestigungsmöglichkeiten kann angefordert werden.

Belastung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

Duschhocker

Benutzergewicht: max. 150 kg

Duschstühle, Dusch- und Toilettenstühle

Benutzergewicht: max. 200 kg
Dauerbelastung einer Armlehne: max. 100 kg

Dusch-, Toilettenstuhl hoch belastbar

Benutzergewicht: max. 300 kg.
Dauerbelastung einer Armlehne: max. 150 kg.

Dusch-, Toilettenstuhl 'Trento'

Benutzergewicht: max. 200 kg.
Dauerbelastung einer Armlehne: max. 100 kg

Kippbarer Duschstuhl und höhenverstellbarer/kippbarer Duschstuhl

Benutzergewicht: max. 150 kg
Dauerbelastung einer Armlehne max 100 kg

Duschsitz

Benutzergewicht: max. 150 kg.
Dauerbelastung des Kunststoffsitzes oder des Sitzes mit HT-Bespannung in Kombination mit einer Bodenstütze: max. 300 kg.
Dauerbelastung einer Armlehne max. 75 kg

Duschliegen

Benutzergewicht: max. 150 kg.

Feste und hochklappbare Wandstützgriffe

Benutzergewicht: max. 150 kg.
laterale Dauerbelastung 100 kg.

Wandhaltegriffe 'Ergogrip'

Benutzergewicht: max. 150 kg.

Wegschwenkbarer Aufrichter & Handgriff zur Deckenmontage

Benutzergewicht: max. 150 kg.

ProGrip

Benutzergewicht: max. 150 kg.

Alle Maße in diesem Prospekt sind in mm angegeben.

Die Toleranz beträgt in allen angegebenen Maßen ± 5 mm.

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt werden, behalten wir uns Änderungen vor.

Alle Maße in diesem Prospekt sind in mm angegeben. Die Toleranz beträgt in allen angegebenen Maßen ± 5 mm.

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt werden, behalten wir uns Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Druckfehler.

Hilfsmittelverzeichnis

Artikelnummer:	Hilfsmittelnummer:	Artikel:
LI2142.000	18.46.03.0024	Duschrollstuhl für Selbstfahrer
LI2142.100	18.46.03.0025	Duschrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.021	18.46.03.0026	Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.121	18.46.03.0027	Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.111	18.46.03.0028	Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2138.011	18.46.03.0029	Dusch- und Toilettenrollstuhl für Selbstfahrer
LI2137.021	18.46.03.1020	Dusch- und Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.121	18.46.03.1021	Dusch- und Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.011	18.46.03.1020	Dusch- und Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2137.111	18.46.03.1021	Dusch- und Toilettenstuhl mit Lenkrädern
LI2141.000	18.46.03.1022	Duschstuhl mit Lenkrädern
LI2141.100	18.46.03.1023	Duschstuhl mit Lenkrädern
LI2513.150	04.40.03.4002	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2513.170	04.40.03.4003	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2513.190	04.40.03.4004	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2514.150	04.40.03.4005	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2514.170	04.40.03.4006	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2514.190	04.40.03.4007	Höhenverstellbare und fahrbare Duschliege
LI2201.200	04.40.03.0018	Duschsitz
LI2202.200	04.40.03.0019	Duschsitz mit Rückenlehne
LI2203.300	04.40.03.0020	Duschsitz mit Rücken- und Armlehne
LI2603.350	04.40.05.1163	Stützklappgriff 50cm
LI2603.360	04.40.05.1164	Stützklappgriff 60cm
LI2603.370	04.40.05.1165	Stützklappgriff 70cm
LI2603.380	04.40.05.1166	Stützklappgriff 80cm
LI2603.390	04.40.05.1167	Stützklappgriff 90cm

Wandhaltegriffe werden nicht mehr in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen

Für Stützgriffe, Stützklappgriffe, Duschsitze, ProGrip, Back-Up, Stativ zur Bodenmontage, Höhenverstellung für Stützklappgriffe und Wegschwenkbarer Aufrichter

Verankerungsgrund:	benötigtes Material:	benötigte Schrauben:
Massivbeton, Naturstein, Lochziegel, Kalksandstein	Fischer Universaldübel UX 10 art. 77869	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm
Massiver Porenbeton (Ytong, Durox), Bimsstein, Vollgipsziegel, Leichtbeton-Vollstein	Injektions-Mörtel + Gewindestange eventuell anzuwendende Materialien: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Gewindestange M8	Edelstahl Gewindestange M8
perforierte Hochlochziegel (Poriso), Kalksand-Lochstein	Injektions-Mörtel + Injektions-Ankerhülse + Einschraubanker eventuell anzuwendende Materialien: - FIS VS 150 C set art. 45302 of FIS VS 150 C art. 0509 - Fischer Injektions-Ankerhülse FIS HK 14x70K art.50436 - Fischer Einschraubanker FIS E 8x85K art.58050	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm
Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatte	Wand verstärken zum Beispiel mit Multiplex	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm
Vorwandinstallationen z.B. Geberit, Wisa, Viga, Tece, Mepa	Durch die vom Vorwandinstallationsanbieter geforderte Verstärkung (z.B. 32 mm Schichtholzplatte, wasserfest) montieren	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 8mm

Bei den Angaben für die Befestigung handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Die Befestigungsart, wie auch die Länge der Schrauben richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten. Für unsachgemäße Befestigung und deren Folgeschäden wird von der Firma Handicare keine Haftung übernommen.

Für 'Ergogrip' Wandhaltegriffe, Duschrahmen, Handgriff zur Deckenmontage, Waschbeckenstütze, Wandhaltegriff für Treppenspindel, Wandhaltegriff für Türrahmen und Rückenstütze

Verankerungsgrund:	benötigtes Material:	benötigte Schrauben:
Massivbeton, Naturstein, Lochziegel, Kalksandstein	Fischer Universaldübel UX 8 art. 77869	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm
Massiver Porenbeton (Ytong, Durox), Bimsstein, Vollgipsziegel, Leichtbeton-Vollstein	Injektions-Mörtel + Gewindestange eventuell anzuwendende Materialien: - FIS VS 150 C Set - Fischer Gewindestange M6	Edelstahl Gewindestange M6
perforierte Hochlochziegel (Poriso), Kalksand-Lochstein	Injektions-Mörtel + Injektions-Ankerhülse + Einschraubanker eventuell anzuwendende Materialien: - FIS VS 150 C Set - Fischer Injektions-Ankerhülse FIS HK 12x60K - Fischer Einschraubanker FIS E 6x75K	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm
Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatte	Wand verstärken zum Beispiel mit Multiplex	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm
Vorwandinstallationen z.B. Geberit, Wisa, Viga, Tece, Mepa	Durch die vom Vorwandinstallationsanbieter geforderte Verstärkung (z.B. 32mm Schichtholzplatte, wasserfest) montieren	Sechskant-Holzschrauben, Edelstahl 6mm

Bei den Angaben für die Befestigung handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Die Befestigungsart, wie auch die Länge der Schrauben richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten. Für unsachgemäße Befestigung und deren Folgeschäden wird von der Firma Handicare keine Haftung übernommen.



LinidoSolutions

Deutschland Vertretung:

OXYON-WOLFF e.K.

Spezialeinrichtungen für Bad und Toilette
Fringsstraße 5 · 40221 Düsseldorf

Telefon **0211 392095 / 96**
Telefax **0211 395352**

Mail **info@oxyon-wolff.de**
Web **www.oxyon-wolff.de**

